


HESTO-MED – mehr als nur Standard

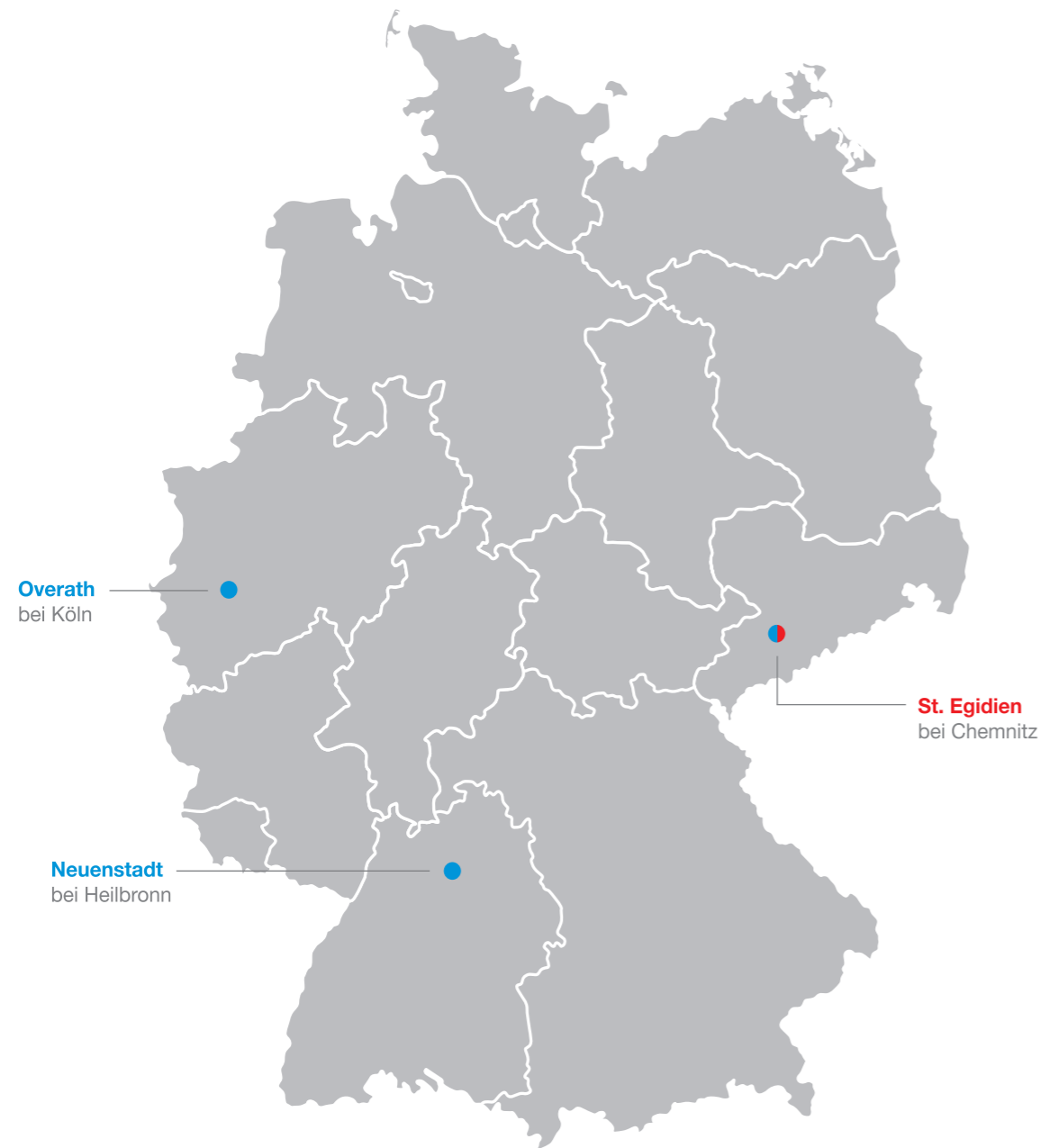

Hersteller

Hesto-Med GmbH
Am Eichenwald 13, D-09356 St. Egidien

Fon: +49 37204 638-0 info@hesto-med.de
Fax: +49 37204 638-21 www.hesto-med.de



Niederlassung Ost

hestomed+helbig Medizintechnik GmbH & Co.KG
Am Eichenwald 13, D-09356 St. Egidien

Fon: +49 37204 638-90 ost@hestomed-helbig.de
Fax: +49 37204 638-99 www.hestomed-helbig.de

Vertriebsgesellschaft

hestomed+helbig Medizintechnik GmbH & Co.KG
Austraße 15, D-74196 Neuenstadt am Kocher


Fon: +49 7139 9374-100 info@hestomed-helbig.de
Fax: +49 7139 9374-144 www.hestomed-helbig.de

Niederlassung West

hestomed+helbig Medizintechnik GmbH & Co.KG
Hammermühle 20, D-51491 Overath

Fon: +49 2206 911765-0 west@hestomed-helbig.de
Fax: +49 2206 911765-9 www.hestomed-helbig.de

REDSLIDE – das neue Schienensystem von Hesto-Med

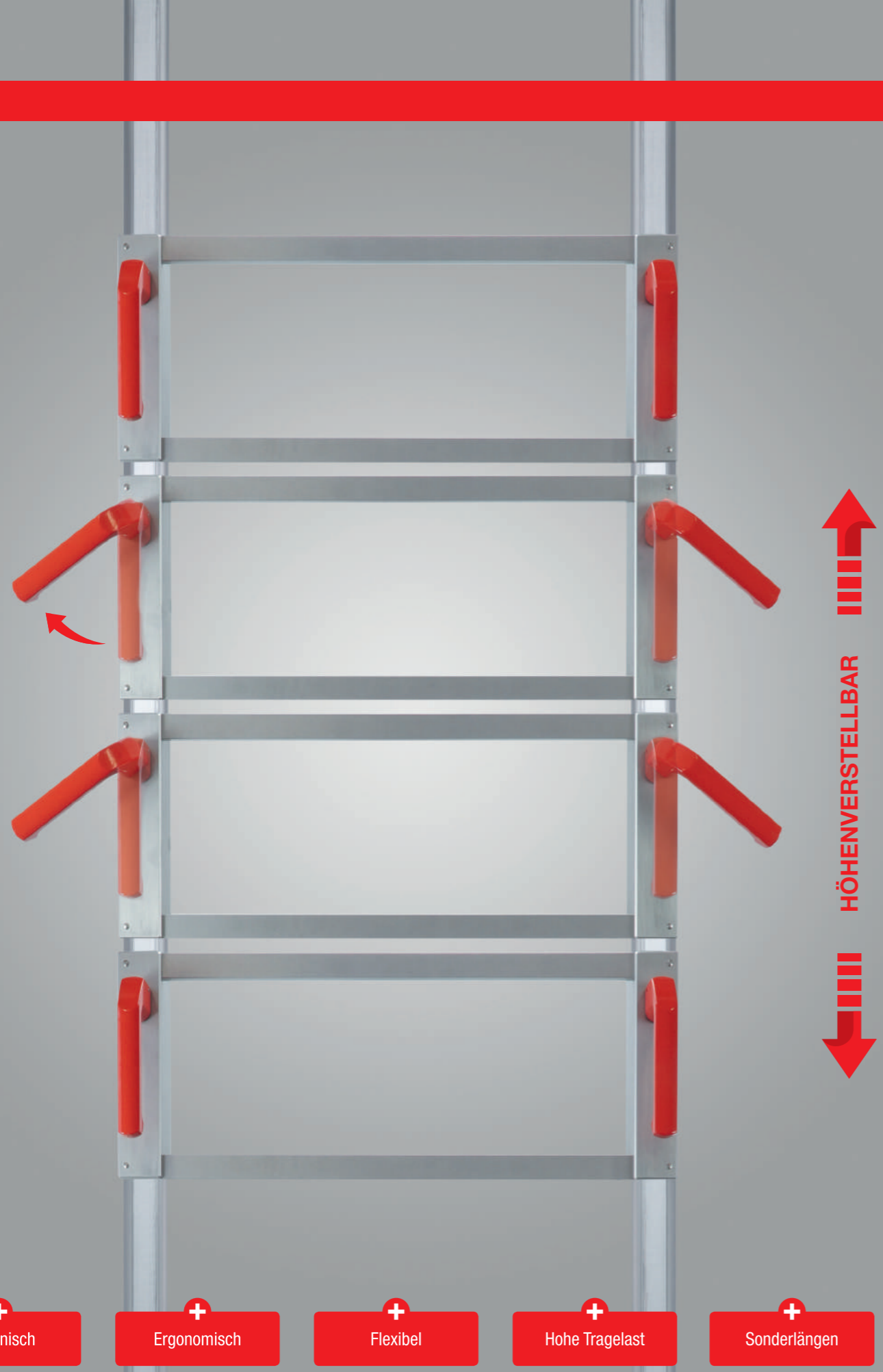

REDSLIDE – das neue Schienensystem von Hesto-Med

1. PERFEKTE ERGONOMIE FÜR JEDEN MITARBEITER!

Die REDSLIDE-Geräteschlitten lassen sich leichtgängig und stufenlos in der Höhe verstellen. Alle Geräte sind damit immer in der richtigen Arbeitshöhe. Sogar mit montierten Geräten wie Defibrillator oder Beatmungsgerät lässt sich REDSLIDE sicher und einfach von einer Person bedienen.

2. BESTE HYGIENE!

Im Vergleich zu anderen Produkten überzeugt REDSLIDE durch seine geschlossene Bauform. Alle Oberflächen lassen sich dadurch sehr einfach und ohne Verletzungsgefahr reinigen und desinfizieren.



3. HÄLT WAS AUS!

REDSLIDE hat erfolgreich den nach DIN EN 1789 geforderten Crashtest absolviert (10g dynamisch) und ist für eine Nutzlast von 30kg je Geräteschlitten ausgelegt. Die integrierte Sicherheitsbremse verhindert selbsttätig ein unkontrolliertes Verrutschen auch beim plötzlichen oder versehentlichen Loslassen der Handgriffe.

4. FLEXIBEL IN DER AUSSTATTUNG!

Die senkrechten Schienen werden im Abstand von 650mm parallel montiert. Die Länge kann dabei zwischen 1050 und 1550mm gewählt werden. Ein Schienenpaar bietet je nach Länge Platz für bis zu 3 Geräteschlitten mit je 2 waagerechten Normschienen. Aber auch die platzsparende Montage von mehreren Geräten auf einem Geräteschlitten ist möglich.

5. OFFEN FÜR VIELES!

Die senkrechten Schienen haben die Form einer Gerätenormschiene (25x10mm), so dass daran auch direkt Geräte befestigt werden können. Das ist insbesondere für selten benutzte oder aus dem Krankenhaus mitgenommene Geräte wichtig, für die keine feste Halterung im Fahrzeug verbaut ist. Die waagerechten Schienen sind ebenfalls als Normprofil ausgeführt und außerdem im Abstand von 200mm auf dem Geräteschlitten montiert, so dass sie kompatibel zu den sogenannten Hessenhalterungen sind. Mit den RedFix-Gerätehalterungen lässt sich das REDSLIDE-Schienensystem weiter ausbauen.

Bestellinformationen:

MODELL	BESCHREIBUNG	BEST.-NR.
REDSLIDE-Basisschienen	1 Paar, Länge 1050mm (max. 2 REDSLIDE-Geräteschlitten)	RS-2-1050
REDSLIDE-Basisschienen	1 Paar, Länge 1300mm (max. 2 REDSLIDE-Geräteschlitten)	RS-2-1300
REDSLIDE-Basisschienen	1 Paar, Länge 1550mm (max. 3 REDSLIDE-Geräteschlitten)	RS-2-1550
REDSLIDE-Basisschienen	1 Stück, Länge 300mm zur Einzelnutzung ohne Geräteschlitten	RS-1-300
REDSLIDE-Geräteschlitten	1 Stück mit waagerechter Doppelschiene	RS-S-650

REDSLIDE-Basisschienen können auf Wunsch in Sonderlängen gefertigt werden.
REDSLIDE-Geräteschlitten können auf Wunsch in Sonderbreiten (<650mm) gefertigt werden.