

AERObag®

Beatmungsbeutel und -masken | Zubehör
Hyperventilationsmaske



AERObag®

Silikon- und PVC-Beatmungsbeutel

AERObag® - Beatmungsbeutel

Wiederverwendbare Silikon-Beatmungsbeutel und PVC-Beatmungsbeutel für den Einmalgebrauch, für die Beatmung von Patienten mit Atemstillstand oder insuffizienter Atmung. Geeignet für Erwachsene (1500 ml), Kinder (450 ml) und Babys (280 ml).

Leistungsstark, patientengerecht und anwenderfreundlich.

Hochwertige Materialien

- Alle Komponenten latexfrei
- Desinfizierbar, autoklavierbar bis 134°C, gassterilisierbar (Silikon-Beatmungsbeutel)
- Robust: einsatzbereit auch bei härtesten Einsatzbedingungen

Hygienefreundlich und “einsichtig“

- Verunreinigungen dank transparentem Design sehr gut erkennbar
- Einfache Handhabung für die leichte hygienische Aufbereitung

Hoher Bedienkomfort

- Sicherer Halt durch griffige Oberflächenstruktur
- Drehbarer Patientenanschlusskonus
- Druckbegrenzungsventil Erwachsene / Kinder ≤ 60 cmH₂O, bei 60 l/min* (Abb. 1)
oder Kinder / Babys 30 - 45 cmH₂O, bei 15 l/min*

*Luftdurchfluss durch das Druckbegrenzungs-system



Druckbegrenzungsventil

All-In-One-Ansaugventil

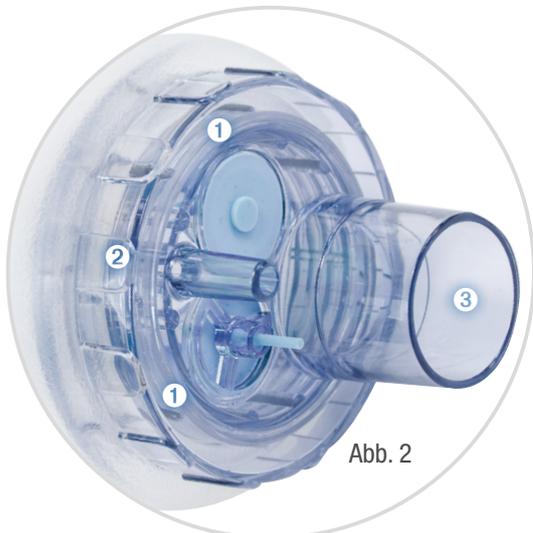


Abb. 2

Ansaugventil (integr. Reservoirventil)

Passgenau

- Patientenanschluss 22F/15M nach ISO 5356
- Anschlussmöglichkeit für Masken, Tuben und Filter
- Innovatives All-In-One Ansaugventil (Abb. 2)
→ das bisher benötigte Reservoirventil ist integriert ①
- Separater Sauerstoffanschluss für 6 mm O₂-Schläuche ②
- Konisches Steckerteil – 25,6 mm AD / 21,7 mm ID:
 - Direkter Anschluss für Sauerstoffreservoirbeutel
 - Anschluss von Demandventilen bzw. Bag-Refill-Systemen mit Anschlusskonnektor 22 mm AD ist mittels eines separaten Adapters möglich ③

2 verschiedene Beatmungsbeuteltypen mit 3 Modellen (Erwachsene | Kinder | Babys)

Silikon-Beatmungsbeutel (Wiederverwendbar / Autoklavierbar)

Anschlussmöglichkeit eines PEEP-Ventils über zusätzlichen, optional erhältlichen Adapter/Diverter (HBB05-DV).




Erwachsene > 20 kg



Babys < 5 kg



Kinder 5 - 20 kg

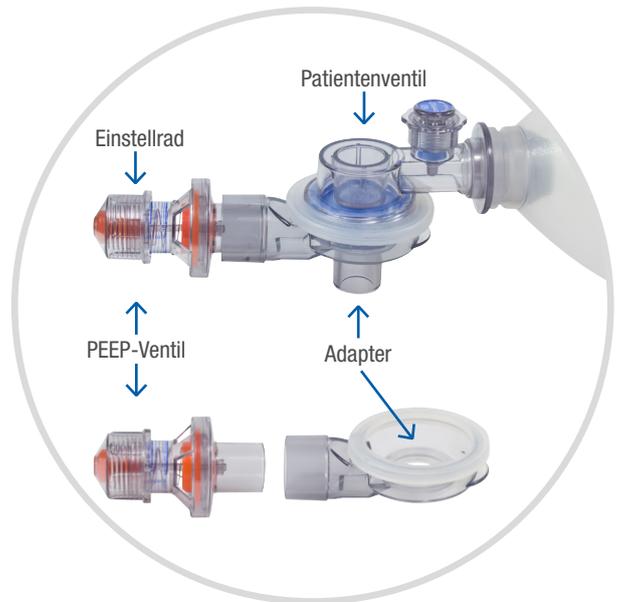

PVC-Beatmungsbeutel (Einmalgebrauch)

Patientenventil mit integriertem Expirationsschenkel

Anschlussmöglichkeit eines PEEP-Ventils direkt am integrierten Expirationsschenkel.




Erwachsene > 20 kg



Babys < 5 kg



Kinder 5 - 20 kg

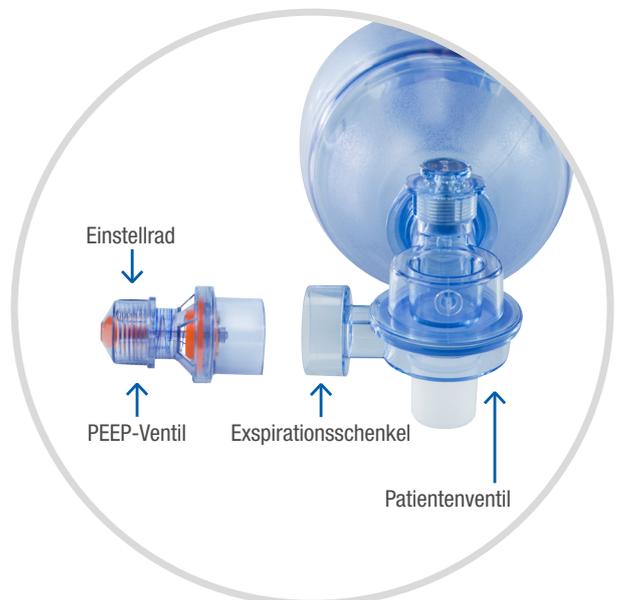

AERObag®

Beatmungsmasken und Zubehör

AERObag® - Beatmungsmasken

Wiederverwendbare Silikon-Beatmungsmasken und PVC-Beatmungsmasken zum einmaligen Gebrauch. Transparent, anatomisch geformt und mit guter Abdichtung schon bei niedrigem Anpressdruck.

Unterschiedliche Maskengrößen für Erwachsene, Kinder und Babys.



4 verschiedene Maskentypen

Silikon (Wiederverwendbar / Autoklavierbar)

- Mit Silikon-Lippenwulst und Klarsichtkörper aus Polysulfon
- Größen 3-5



Lippenwulst



Vollsilikon (Wiederverwendbar / Autoklavierbar)

- Mit integrierter Silikon-Lippenwulst
- Größen 0-5



Lippenwulst



PVC (Einmalgebrauch)

- Masken mit aufblasbarer PVC-Wulst (mit Ventil) und Klarsichtkörper aus PVC
- Farblich codierter Befestigungshakenring aus PE für Masken-Kopfbänderung

- Größen:

- 0 ○
- 1 ○
- 2 ○
- 3 ○
- 4 ○
- 5 ○



Ventil

Zubehör für Beatmungsmasken

AERObag® - Inflator / Deflator


Kleiner handlicher Balg, der zum Aufblasen und Entleeren der Luftpolster von Beatmungsmasken verwendet wird.

Vorteile

- Schnelles Aufblasen und Entleeren der Luftpolster
- Guter Griff und einfaches Handling durch texturierten Balg
- Angenehme Einhand-Bedienung
- Eingearbeiteter Befestigungsring
- Immer und überall einsatzbereit

Spezifikationen

- Material: PVC, latexfrei
- Maße: 7,9 x 4,2 cm
- Farbe: Blau
- Gewicht: ca. 22,5 g

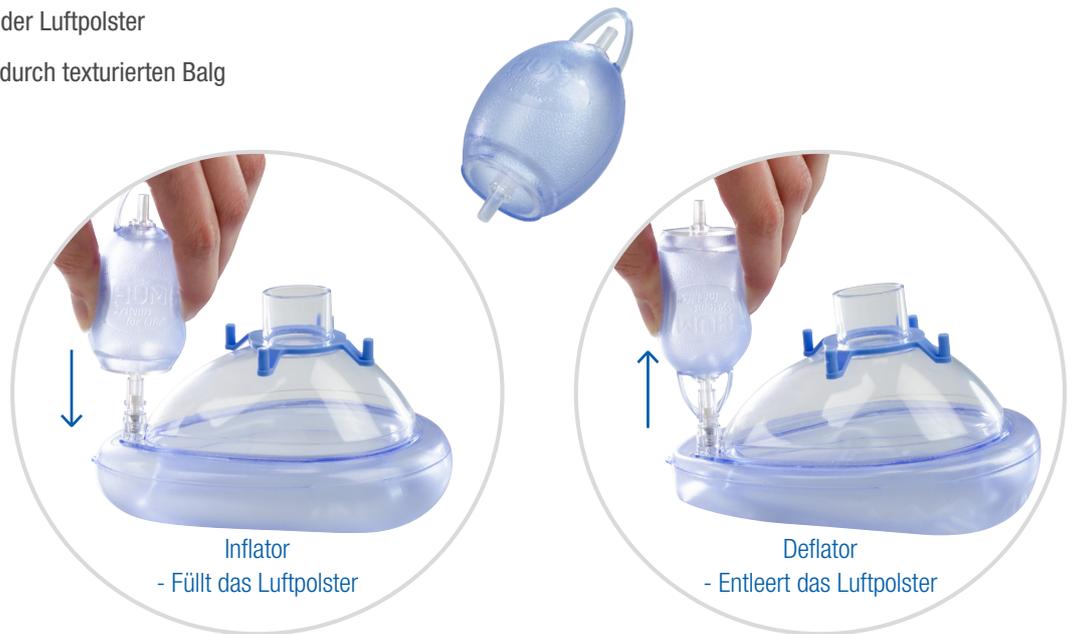

Einmalgebrauch



Wiederverwendbar / Autoklavierbar

Befestigungshaken


Für Masken-Kopfbänderung, aus autoklavierbarem Polysulfon oder zum Einmalgebrauch aus Polyethylen.

Masken-Kopfbänderung

Zur Fixierung der AERObag® - Beatmungsmasken.
Wiederverwendbar aus Silikon (weiß) oder zum Einmalgebrauch aus Gummi (schwarz).



Längen: 440 mm und 700 mm
Wiederverwendbar / Autoklavierbar

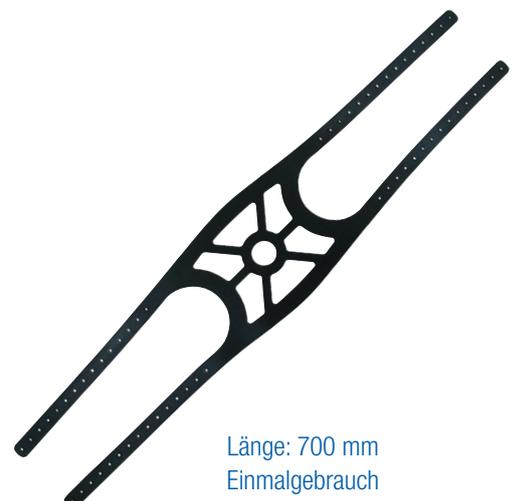

Länge: 700 mm
Einmalgebrauch

AERObag®

Zubehör für Beatmungsbeutel | Beatmungsbeutel-Sets Hyperventilationsmaske

Zubehör für Beatmungsbeutel

AERObag® - PEEP-Ventile

Zur Verbesserung der Oxygenierung bei vielfältigen Störungen der Lungenfunktion. Alle PEEP-Ventile (PEEP = Positive Endexpiratory Pressure) sind mit 2 Sockeladaptern in den Größen 22 mm AD und 30 mm ID ausgestattet. Sie werden entweder mittels eines Diverters / Adapters am Patientenventil aufgesteckt oder bei den Modellen HBB06-..2 direkt am Expirationsschenkel angeschlossen.



Wiederverwendbar / Autoklavierbar

Material: Polysulfon (PSF)

- PEEP-Ventil 10 mbar - stufenlos regulierbar von 2 cmH₂O - 10 cmH₂O
- PEEP-Ventil 20 mbar - stufenlos regulierbar von 5 cmH₂O - 20 cmH₂O



Adapter (Diverter)



Einmalgebrauch

Material: Polycarbonat (PC)

- PEEP-Ventil 10 mbar - stufenlos regulierbar von 2 cmH₂O - 10 cmH₂O
- PEEP-Ventil 20 mbar - stufenlos regulierbar von 5 cmH₂O - 20 cmH₂O




Adapter (Diverter)

Nur für PVC-Vorgängermodelle



Reservoirbeutel

2500 ml oder 600 ml aus PVC oder PE.
Für eine zusätzliche Oxygenierung bei der Beatmung.

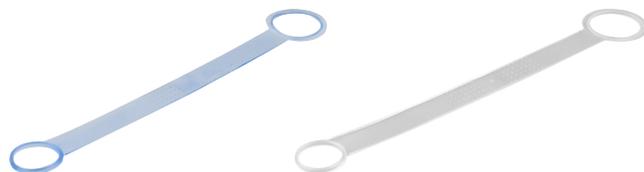

Handschlaufen

Handschlaufen aus Silikon oder PVC.
Für mehr Anwenderkomfort und gleichmäßige Kompression bei der Beatmung.

Aufbewahrungsbox

Alles verstaut und schnell zur Hand.

Aufbewahrungsbox passend für alle AERObag® Beatmungsbeutel-Modelle inkl. Zubehör

- Transparenter Kunststoff (PP)
- Klappbarer Handgriff
- Großer Stauraum
Maße (B x H x T): 340 x 145 x 135 mm



AERObag® - Beatmungsbeutel-Sets

PVC- und Silikon-Beatmungsbeutel-Sets für Erwachsene, Kinder und Babys. Komplettsysteme für die Beatmung im Notfall. Bestehend aus: Beatmungsbeutel, Beatmungsmaske(n), Reservoirbeutel, Sauerstoffschlauch.



Auf Anfrage können die Beatmungsbeutel-Sets auch kundenspezifisch konfiguriert werden.

Beispielkonfiguration

AERObag® | Silikon-Beatmungsbeutel Silicone Manual Resuscitator

<p>Silikon-Beatmungsbeutel <i>Silicone manual resuscitator</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Erwachsene <i>Adults</i></p> <p><input type="checkbox"/> Kinder <i>Children</i></p> <p><input type="checkbox"/> Kleinkinder/Babys <i>Infants/Babys</i></p> <p>PEEP Ventil <i>PEEP valve</i></p> <p><input type="checkbox"/> 10 mbar</p> <p><input type="checkbox"/> 20 mbar</p>	<p>Silikon-Beatmungsmaske <i>Silicone resuscitation mask</i></p> <p><input type="checkbox"/> 0V <input checked="" type="checkbox"/> 3V <input type="checkbox"/> 3</p> <p><input type="checkbox"/> 1V <input checked="" type="checkbox"/> 4V <input type="checkbox"/> 4</p> <p><input type="checkbox"/> 2V <input checked="" type="checkbox"/> 5V <input type="checkbox"/> 5</p>	<p>Zubehör <i>Accessories</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Reservoir 2500 ml <i>Reservoir 2500 ml</i></p> <p><input type="checkbox"/> Reservoir 600 ml <i>Reservoir 600 ml</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2 m Oz-Sicherheitsschlauch <i>2 m Oz-Supply tubing</i></p> <p><input type="checkbox"/> Handschlaufe <i>Hand strap</i></p>
---	--	--

HUM Gesellschaft für Homecare
und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | D-44536 Lünen
FON +49 (0)2 31/ 88 08 85-0 | FAX +49 (0)2 31/ 88 08 85-58
Mail: sales@hum-online.de | http://www.hum-online.de

AERObag® - Beatmungsbeutel
ID 1024926 Rev. 1.0 | 26.03.2020

AERObag® - Hyperventilationsmaske (Einmalgebrauch)

Die Hyperventilationsmaske wird für eine optimale „Therapie durch Rückatmung“ zur begleitenden Behandlung des Hyperventilationssyndroms eingesetzt.


Die preiswerte Lösung für die schnelle Hilfe bei Hyperventilation

Optimale Therapie durch Rückatmung

- Weiche, gut dichtende Maske
- Großvolumiger Rückatembeutel (2000 ml)

Anwender- und patientenfreundlich

- Anatomiegerechte Passform
- Verstellbares Gummiband
- Breite Nasenklammer
- Glasklares PVC - Medical Grade

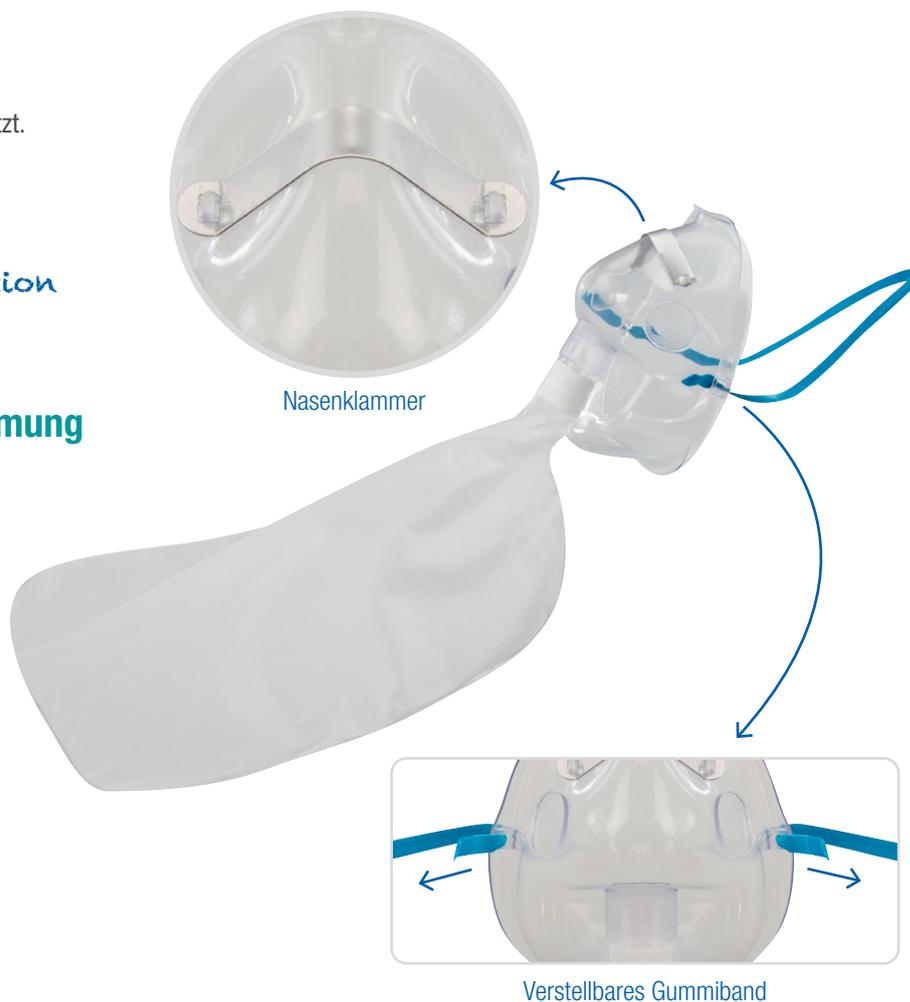

Lieferprogramm Beatmungsbeutel und -masken | -Zubehör | Hyperventilationsmaske

AERObag® - Silikon-Beatmungsbeutel

Best.-Nr.	Beschreibung	
HBB05-E	AERObag® - BB05-E, Beatmungsbeutel Silikon, Erwachsene	
HBB05-K	AERObag® - BB05-K, Beatmungsbeutel Silikon, Kinder	
HBB05-B	AERObag® - BB05-B, Beatmungsbeutel Silikon, Baby	

AERObag® - PVC-Beatmungsbeutel

Best.-Nr.	Beschreibung	
HBB06-E2	AERObag® - BB06-E, Beatmungsbeutel PVC, Erwachsene	
HBB06-K2	AERObag® - BB06-K, Beatmungsbeutel PVC, Kinder	
HBB06-B2	AERObag® - BB06-B, Beatmungsbeutel PVC, Baby	

Zubehör

Best.-Nr.	Beschreibung	
HBB05-RB600	AERObag® - RB05-600, Reservoirbeutel 600 ml, PVC	
HBB05-RB2500	AERObag® - RB05-2500, Reservoirbeutel 2500 ml, PVC	
HBB05-DV	AERObag® - DV05, Diverter / PEEP-Ventil-Adapter, autoklavierbar	
HSS11-2	AEROpart® - O ₂ -Schlauch 11-2, Sicherheitsschlauch 2 m	
HBB05-HS	AERObag® - HS05, Handschlaufe, Silikon	
HPV05-10	AERObag® - PV05-10, PEEP-Ventil, 2-10 cmH ₂ O, orange, PSF, autoklavierbar	
HPV05-20	AERObag® - PV05-20, PEEP-Ventil, 5-20 cmH ₂ O, blau, PSF, autoklavierbar	
HBB05-AB	AERObag® - BB05-AB, Aufbewahrungsbox für Beatmungsbeutel	

Zubehör

Best.-Nr.	Beschreibung	
HBB06-RB600	AERObag® - RB06-600, Reservoirbeutel 600 ml, PE	
HBB06-RB2500	AERObag® - RB06-2500, Reservoirbeutel 2500 ml, PE	
HBB06-DV30	AERObag® - DV06-30, Diverter / PEEP-Ventil-Adapter, Einmalgebrauch	
HSS11-2	AEROpart® - O ₂ -Schlauch 11-2, Sicherheitsschlauch 2 m	
HBB06-HS	AERObag® - HS06, Handschlaufe, PVC	
HPV06-10	AERObag® - PV06-10, PEEP-Ventil, 2-10 cmH ₂ O, orange, Polycarbonat, Einmalgebrauch	
HPV06-20	AERObag® - PV06-20, PEEP-Ventil, 5-20 cmH ₂ O, blau, Polycarbonat, Einmalgebrauch	

AERObag® - Silikon-Beatmungsmasken

Best.-Nr.	Beschreibung	
HBM05-5	AERObag® - BM05-5, Silikon-Beatmungsmaske, Gr. 5	
HBM05-4	AERObag® - BM05-4, Silikon-Beatmungsmaske, Gr. 4	
HBM05-3	AERObag® - BM05-3, Silikon-Beatmungsmaske, Gr. 3	
HBM05-5V	AERObag® - BM05-5V, Vollsilikon-Beatmungsmaske, Gr. 5	
HBM05-4V	AERObag® - BM05-4V, Vollsilikon-Beatmungsmaske, Gr. 4	
HBM05-3V	AERObag® - BM05-3V, Vollsilikon-Beatmungsmaske, Gr. 3	
HBM05-2V	AERObag® - BM05-2V, Vollsilikon-Beatmungsmaske, Gr. 2	
HBM05-1V	AERObag® - BM05-1V, Vollsilikon-Beatmungsmaske, Gr. 1	
HBM05-0V	AERObag® - BM05-0V, Vollsilikon-Beatmungsmaske, Gr. 0	

AERObag® - PVC-Beatmungsmasken

Best.-Nr.	Beschreibung	
HBM06-5V	AERObag® - BM06-5V, PVC-Beatmungsmaske mit Ventil, Gr. 5	
HBM06-4V	AERObag® - BM06-4V, PVC-Beatmungsmaske, mit Ventil Gr. 4	
HBM06-3V	AERObag® - BM06-3V, PVC-Beatmungsmaske mit Ventil, Gr. 3	
HBM06-2V	AERObag® - BM06-2V, PVC-Beatmungsmaske mit Ventil, Gr. 2	
HBM06-1V	AERObag® - BM06-1V, PVC-Beatmungsmaske mit Ventil, Gr. 1	
HBM06-0V	AERObag® - BM06-0V, PVC-Beatmungsmaske mit Ventil, Gr. 0	

AERObag® - Beatmungsmasken Zubehör

HBM01-ID	AERObag® - Inflator / Deflator 
HBM05-BH	AERObag® - BM05-BH, Befestigungshaken, Polysulfon, autoklavierbar, transparent
HBM06-BH	AERObag® - BM06-BH, Befestigungshaken, Polyethylen, disposable, blau 
HBM05-B440	AERObag® - BM05-B440, Masken-Kopfbänderung, 440 mm, weiß, Silikon 
HBM05-B700	AERObag® - BM05-B700, Masken-Kopfbänderung, 700 mm, weiß, Silikon 
HBM06-B700	AERObag® - BM06-B700, Masken-Kopfbänderung, 700 mm, schwarz, Gummi 

AERObag® - Hyperventilationsmaske

HBM06-HV2000E	AERObag® - BM06-HV2000E, PVC-Hyperventilationsmaske	
---------------	---	---