

# AEROresc®

EASY Splints | Universalschienen



## Immobilisation

Zur Ruhigstellung und Sicherung  
von Frakturen und Sportverletzungen

# AEROresc®

## Universalschienen | -Set

### AEROresc® - EASY Splints

Universalschienen zur Schienung nahezu aller menschlichen Gliedmaßen und der Halswirbelsäule. Hergestellt aus leichtem und röntgenstrahlendurchlässigem Material: Mantel aus Kunststoffschäum (IPXE) - Patientenseite „Blau“ Außenseite „Gelb“ - Kern aus weichem, modellierbarem Aluminiumgemisch.

EASY Splints - Die Schienen für nahezu alle Einsatzbereiche.

### Vorteile

- Patientenseitig strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt und eine bessere Luftzirkulation
- Flüssigkeitsabweisend (Blut, Sekret, Schweiß) wiederverwendbar
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Flexibel: Roll- & faltbar
- Leichtgewichtig | kompakt und platzsparend | zuschneidbar
- Einsetzbar als Infusionsschiene (insb. in der Neonatologie & Pädiatrie)

### Basisformen und Anwendungsbeispiele



C-Curve | Strong

Ziehen Sie für die Wölbung der C-Curve beide Seitenkanten nach innen. Durch diese Form wird der Splint stabil und unbiegsam.



Reverse C-Curve | Stronger

Formen Sie die EASY Splint C-Curve. Anschließend formen Sie die Seitenkanten in die entgegengesetzte Richtung.



T-Curve | Strongest


Legen Sie die Seitenkanten übereinander. Biegen Sie dann die Hälfte jeder Seite um, bis die Biegung einen 90° Winkel erreicht hat. Diese Form führt zu einer stark erhöhten Stabilität.



Bessere Luftzirkulation | Sicherer Halt

### Einsatzbereiche

- Rettungsdienst
- Kliniken
- Neonatologie
- Polizei, Feuerwehr
- Betriebe, Schulen
- Freizeit und Sport
- u.v.m.

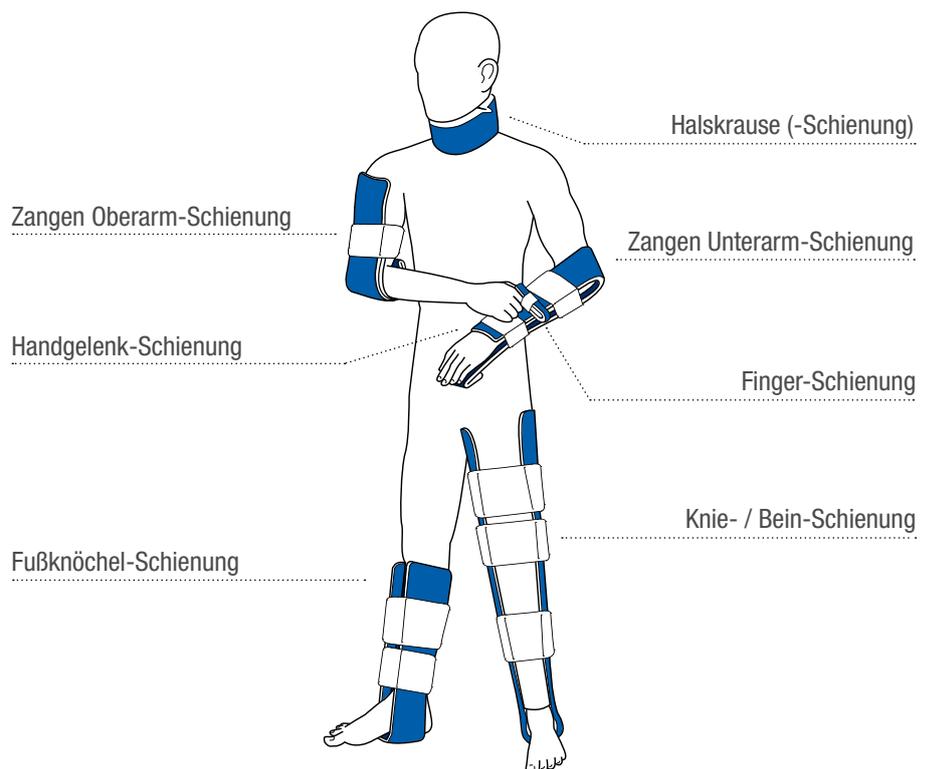

## Die Modelle

- einzelne Universalschienen, zusammengerollt verpackt

### EASY Splint Xtra Small | Finger

Bei dem XS-Splint handelt es sich um eine kleine Universalschiene, die sich ideal zur Ruhigstellung kleinerer, verletzter Gliedmaßen eignet.

Maße: 5 x 11 cm | Gewicht: 5 g



### EASY Splint Medium | gerollt

Ein Großteil aller Behandlungen in der Immobilisation können bereits mit unserer Medium-Variante abgedeckt werden.

Maße: 50 x 11 cm | Gewicht: 80 g



### EASY Splint Xtra Large | gerollt

Das XL-Modell unseres Sortiments bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die verschiedensten Schienungsarten.

Maße: 100 x 11 cm | Gewicht: 160 g



## Universalschienen-Set

- alle Schienengrößen in einem Set

### EASY Splint Set 1

Mit unserem Universalschienen-Set sind Sie für nahezu alle Notfallsituationen, in denen eine Immobilisation von menschlichen Gliedmaßen erforderlich ist, bestens ausgestattet. Das Set besteht aus 3 unterschiedlichen Schienengrößen, die in einer platzsparenden Einsatztasche untergebracht sind.

2 x EASY Splint Xtra Small / Finger

1 x EASY Splint Medium

1 x EASY Splint Xtra Large

1 x Einsatztasche für EASY Splint Set

Maße: 17,5 x 12 x 6 cm | Gewicht: 313 g



## Set-Ersatzschienen

- einzelne Universalschienen zum Auffüllen des Sets, zusammengefasst verpackt



EASY Splint Xtra Small | Finger  
Maße: 5 x 11 cm | Gewicht: 5 g



EASY Splint Medium | gefaltet  
Maße: 50 x 11 cm | Gewicht: 80 g



EASY Splint Xtra Large | gefaltet  
Maße: 100 x 11 cm | Gewicht: 160 g

## Lieferprogramm Splints | Universalschienen

### AEROresc® - EASY Splints

Best.-Nr.	Beschreibung	Größe / Gewicht
HIMT02-SP-XS	AEROresc® - EASY Splint XS, Gelb / Blau	5 x 11 cm / 5 g
HIMT02-SP-M	AEROresc® - EASY Splint M, Gelb / Blau, gerollt	50 x 11 cm / 80 g
HIMT02-SP-XL	AEROresc® - EASY Splint XL, Gelb / Blau, gerollt	100 x 11 cm / 160 g



### AEROresc® - EASY Splint SET1

Best.-Nr.	Beschreibung	Größe / Gewicht
HIMT02-SP-SET1	AEROresc® - EASY Splint SET1, Nylon, Gelb	17,5 x 12 x 6 cm / 313 g



### AEROresc® - EASY Splint SET1 | Einzelne Universalschienen zum Auffüllen des Sets

Best.-Nr.	Beschreibung	Größe / Gewicht
HIMT02-SP-XS	AEROresc® - EASY Splint XS, Gelb / Blau	5 x 11 cm / 5 g
HIMT02-SP-M-SET	AEROresc® - EASY Splint M, Gelb / Blau, gefaltet	50 x 11 cm / 80 g
HIMT02-SP-XL-SET	AEROresc® - EASY Splint XL, Gelb / Blau, gefaltet	100 x 11 cm / 160 g

