



Technisches Datenblatt

Firmenname	
Cook Österreich GmbH	Tel: +43 17 956 7121
Cook Deutschland GmbH	Tel: +49 69 500 72 804
Cook Switzerland AG	Tel: +41 44 800 96 09
Vigilanz-Kontakt: CMEU Regulatory Affairs - Post Market	E-mail: PostMarketEUAuthorisedRep@cookmedical.com Tel: +353 61 33 44 40

PRODUKT:

Melker-Kanülen-Sets für Notfall-Krikothyreotomie

PRODUKTCODE:

C-TCCS-350
C-TCCS-400
C-TCCS-600
C-TCCS-600-SPOPS*

ABMESSUNGEN:Melker-Kanülen-Sets für Notfall-Krikothyreotomie**C-TCCS-350**

Katheter

- Innendurchmesser – 3,5 mm
- Länge – 3,8 cm

C-TCCS-400

Katheter

- Innendurchmesser – 4 mm
- Länge – 4,2 cm

C-TCCS-600

Katheter

- Innendurchmesser – 6 mm
- Länge – 7,5 cm

Melker Krikothyrotomie-Katheterset (Seldinger) für Notfall-Spezialoperationen**C-TCCS-600-SPOPS***


Primärkatheter

- Innendurchmesser – 4 mm
- Länge – 4,2 cm


Sekundärkatheter

- Innendurchmesser – 6 mm
- Länge – 7,5 cm

**Nonstock*

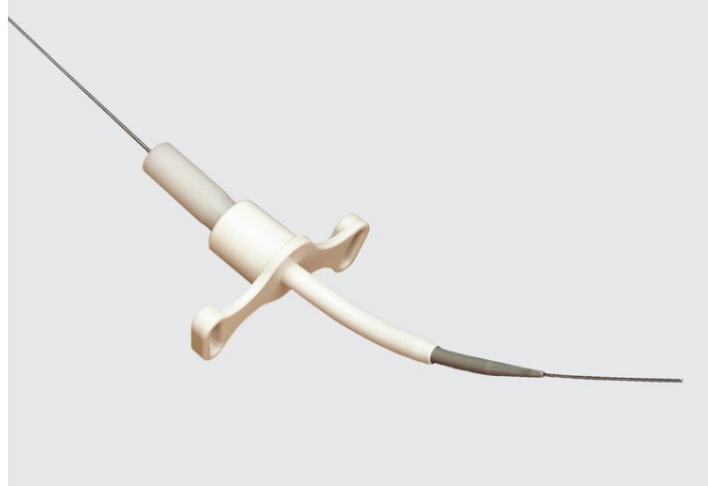BILD:

Melker-Kanülen-Sets für Notfall-Kriothyreotomie

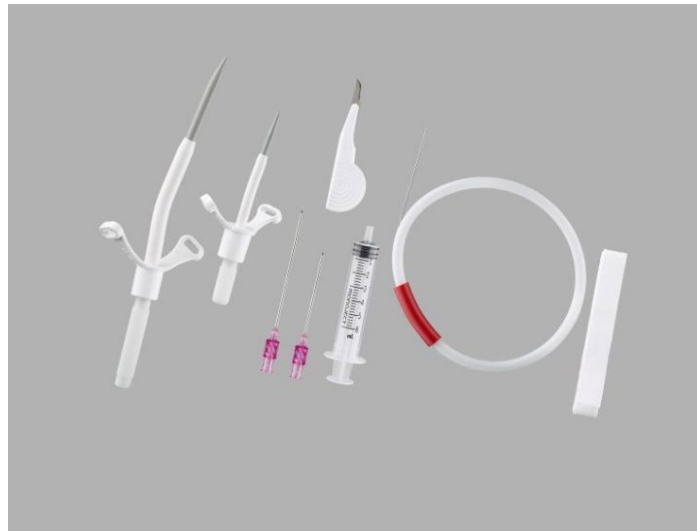

Melker Kriothyrotomie-Katheterset (Seldinger) für Notfall-Spezialoperationen

BESTANDTEILE:

Katheter
Einführnadel
Punktionskanüle
Führungsdraht
Gebogenen Dilatator
Skalpell
Spritze

BESCHREIBUNG:

Die Melker-Kanülen-Sets für Notfall-Krikothyreotomie, mit und ohne Manschette, bestehen aus einer Trachealkanüle, einem Skalpell, einer Spritze, einer Punktionskanüle, einer Einführhilfe für die Kanüle, einem Führungsdraht und einem gebogenen Dilatator.

HINWEIS: Die Notfalltrachealkanüle mit einem Innendurchmesser von 6 mm erlaubt den Einsatz normaler Überdruckbeatmungsverfahren und bei Erwachsenen auch die Spontanatmung des Patienten.

VERWENDUNGSZWECK:

Die Melker-Kanülen-Sets für Notfall-Krikothyreotomie, mit und ohne Manschette, sind für die Schaffung eines notfallmäßigen Atemwegszugangs vorgesehen, wenn eine endotracheale Intubation nicht möglich ist. Der Atemwegszugang wird durch eine perkutane Zugangstechnik (Seldinger) durch den Conus elasticus erreicht. Die anschließende Dilatation des Traktes und der Punktionsstelle der Trachea ermöglicht die Einführung der Notfalltrachealkanüle.

KONTRAINDIKATIONEN:

Keine bekannt.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Das Produkt ist für die Verwendung durch Ärzte bestimmt, die in Techniken des Notfall-Atemwegsmanagements geschult und erfahren sind. Es sind Standardtechniken für die perkutane Einführung von Trachealkanülen anzuwenden.
- Patienten, die eine Koniotomie benötigen, können erhebliche Wirbelsäulenverletzungen haben. Bei Patienten, die erhebliche Verletzungen erlitten haben, sollte die Halswirbelsäule während des gesamten Eingriffs möglichst immobilisiert werden.
- Für den Eingriff sind, sofern dies möglich und angemessen ist, aseptische Techniken und Lokalanästhetika einzusetzen.

EMPFOHLENE AUFBEWAHRUNG:

Kühl und trocken, fern von extremen Temperaturen. Nachdem das Produkt der Verpackung entnommen wurde, auf Beschädigungen überprüfen.

Materialien in Kontakt mit Patienten	PVC Polyethylen PTFE Röntgenopake Materialien Rostfreier Stahl FEP Polycarbonate
---	--

CE-gekennzeichnet	Ja
Klasse	IIa
Identifikationsnummer der benannten Stelle	0123
Hersteller	Cook Incorporated

Einmalgebrauch	Ja
Sterilisiert	Ja
Sterilisierungs-Adresse	Cook Incorporated, 6300 North Matthews Drive, Ellettsville, Indiana 47429 USA
Sterilisierungsmethode	ETO
Haltbarkeit	Bis zu 36 Monate
Biologischer Ursprung	Nein
Latex	Nein
Biokompatibilität	Ja
Gelieferte Menge	1