



Medi-Trace™ Cadence für Erwachsene Multifunktionselektroden für die Defibrillation



Medi-Trace™

Cadence Multifunktionselektroden

Vollständiges Sortiment

Medi-Trace™ „Klassische“ Elektroden

Medi-Trace™ Cadence RTS

Multifunktionselektroden (Röntgentransparent)

Medi-Trace™ Cadence-PC

Multifunktionselektroden (Pre-Connect)

Geeignet für:

- Notfall Defibrillation
- Kardioversion
- Monitoring
- Externes Pacing

- Das leitfähige adhäsive Hydrogel wurde für optimale Klebkraft und elektrischen Kontakt entwickelt
- Der feuchtigkeitsresistente Schaumstoff passt sich dem Körper problemlos an
- Direkter Anschluss an den Defibrillator
- Gradiententechnologie
- Medi-Trace™ Cadence RTS-Elektroden sind röntgentransparent.
- Pre-Connect-Version und farblich gekennzeichnete Verpackung
- Haltbarkeit von zwei Jahren

Besondere Qualitätsmerkmale

Gradiententechnologie



Röntgentransparenz



Pre-Connect-Version



Farblich gekennzeichnete Verpackung



Direktanschluss



Bestellinformationen

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Verwendung mit folgenden Defibrillator Modellen:	Stückzahl/Beutel	Elektrodenpaare/Packung	
31319281	1310P	LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS	1 Paar	10	
31177721	1210H	CodeMaster XL+ (M1772A, M1722B, M1723A, M1723B), Heartstream XLT M3500B ³ , HeartStart MRx (M3535A ³ , M3536A ³), HeartStart XL M4735A ³ , HeartStart 4000 M5500B ³	1 Paar	10	
31469219	1410Z	Zoll PD1400, PD2000, R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, X Series, Propaq MD	1 Paar	10	
40000006	1710H	Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A), HeartStart XL M4735A ¹ , HeartStart 4000 M5500B ¹ , HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²)	1 Paar	10	

1 Erfordert das Philips M3508A "Hands Free Kabel"

2 Der AED-Selbsttest schlägt fehl, wenn die Elektroden bereits angeschlossen sind.

3 Erfordert das Philips M3507A (Barrel Style) "Hands Free Kabel"

- Die Elektroden-Pads sind für Patienten ≥ 8 Jahren oder ≥ 25 kg
- Die Elektroden-Pads sind mit einer Vielzahl von Defibrillatoren kompatibel, die wie folgt gekennzeichnet sind
- Wasserbeständiges Schaumstoffmaterial, passt sich den Körperkonturen an
- Selbstklebender Schaumstoff und leitfähiges Klebehydrogel sorgen für stabile elektrische Leistung bis zu 24 Stunden.

Medi-Trace™ Cadence RTS

Multifunktionselektroden (Röntgentransparent)

Bestellinformationen

Artikelnummer	Röntgentransparent	Verwendung mit folgenden Defibrillator Modellen:	Stückzahl/Beutel	Elektrodenpaare/Packung	
22550A-	Nein	LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS	1 Paar	10	
22550R-	Ja	LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS	1 Paar	10	
22550P*	Ja	LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000)	1 Paar	5	
22770R-	Ja	Zoll PD1400, PD2000, R Series, R Series Plus, R Series ALS, Propaq MD	1 Paar	10	
22770P*	Ja	Zoll PD1400, PD2000, R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, X Series, Propaq MD	1 Paar	5	
22660R-	Ja	Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A), HeartStart XL M4735A ¹ , HeartStart 4000 M5500B ¹ , HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²)	1 Paar	10	
22660P*	Ja	Heartstream XLT M3500B, HeartStart MRx (M3535A, M3536A, M4735A), HeartStart 4000 M5500B	1 Paar	5	
22661R	Ja	CodeMaster XL+ (M1722A, M1722B, M1723A, M1723B), Heartstream XLT M3500B ³ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A ³), HeartStart XL M4735A ³ , HeartStart 4000 M5500B ³	1 Paar	10	
22661P*	Ja	CodeMaster XL+ (M1722A, M1722B, M1723A, M1723B), Heartstream XLT M3500B ³ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A ³), HeartStart XL M4735A ³ , HeartStart 4000 M5500B ³	1 Paar	5	

* Diese Elektroden sind für Patienten < 8 Jahre oder < 25 kg bestimmt.

1 Erfordert das Philips M3508A "Hands Free Kabel"

2 Der AED-Selbsttest schlägt fehl, wenn die Elektroden bereits angeschlossen sind.

3 Erfordert das Philips M3507A (Barrel Style)"Hands Free Kabel"

- Medi-Trace™ Cadence RTS-Elektroden sind röntgentransparent, außer die Artikelnummer 22550A-
- Medi-Trace™ Cadence RTS-Elektroden werden direkt an das Gerät angeschlossen und gewährleisten dadurch eine zuverlässige Verbindung
- Gradienten Technologie und ovale Form für eine gleichmäßige Energieverteilung
- Die direkte Konnektion zu den Geräten macht eine zusätzliche Verwendung von Adaptern überflüssig
- Farblich gekennzeichnete Verpackung und Illustration der Anschlüsse für schnelles und einfaches Identifizieren des Produkts
- Die Kabel haben eine Länge von mehr als 91 cm.
- Leitende Schicht aus Ag/AgCl

Medi-Trace™ Cadence RTS für Erwachsene



Medi-Trace™ Cadence RTS Pädiatrie



Medi-Trace™ Cadence-PC

Multifunktionselektroden (Pre-Connect)



Bestellinformationen

Artikelnummer	Verwendung mit folgenden Defibrillator Modellen:	Stückzahl/ Beutel	Elektro- denpaare/ Packung	
22550PC	LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS	1 Paar	10	
22660PC	Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A ¹), HeartStart XL M4735A, HeartStart 4000 M5500B, HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²)	1 Paar	10	
22661PC	CodeMaster XL+ (M1722A, M1722B, M1723A, M1723B), Heartstream XLT M3500B ³ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A ³), HeartStart XL M4735A ³ , HeartStart 4000 M5500B ³	1 Paar	10	
22770PC	Zoll PD1400, PD2000, R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, X Series, Propaq MD	1 Paar	10	

Alle oben genannten Elektroden sind für Patienten ≥ 8 Jahre oder ≥ 25 kg bestimmt.

1 Erfordert das Philips M3508A "Hands Free Kabel"

2 Der AED-Selbsttest schlägt fehl, wenn die Elektroden bereits angeschlossen sind.

3 Erfordert das Philips M3507A (Barrel Style)"Hands Free Kabel"

- Können bereits vor Öffnen des Beutels an den Defibrillator angeschlossen werden
- Erhältlich für eine Vielzahl von Defibrillatoren auf dem Markt
- Gradient Technologie und ovale Form für eine gleichmäßige Energieverteilung
- Die Kabel haben eine Länge von mehr als 91 cm.
- Farblich gekennzeichnete Verpackung und Illustration der Anschlüsse ein Identifizieren des Produkts
- Die direkte Verbindung zu den Geräten macht eine Verwendung von Adaptern überflüssig
- Leitende Schicht aus Ag/AgCl
- Die leitende Oberfläche einer einzelnen Erwachsenenelektrode beträgt 102 cm^2 oder 204 cm^2 pro Paar
- Erfüllt den IEC 60601-2-4 Norm
- Haltbarkeit von 2 Jahren

Medi-Trace™ Cadence Pre Connected



Medi-Trace™

Besondere Merkmale

Die auf die Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)-Zusammensetzung der Medi-Trace™ Cadence-Elektroden angewendete Gradiententechnologie führt zu einer einheitlicheren Stromverteilung unter der Elektrode während der Defibrillation.

Vergleich der Stromverteilung im Thermogramm

- Geringere Hautverletzungen durch MEDI-TRACE™ Cadence-Elektroden im Vergleich zu Elektroden ohne Gradiententechnologie offenbaren den Vorteil einer einheitlicheren Stromverteilung

Röntgentransparenz


- Medi-Trace™ Cadence RTS-Elektroden verfügen über Nickel-Carbon-Anschlusskabel, was zu einer vollständigen Röntgentransparenz des gesamten Produkts führt

Verlängerte externe Schrittmachertherapie

- Entwickelt zur Verzögerung des Auftretens einer alkalischen Umgebung die aus einer verlängerten externen Stimulation resultiert.
- Eine Tabelle zur Berechnung der Stimulationszeit liegt jeder Bedienungsanleitung bei.

Die folgenden Wärmebildaufnahmen wurden 3,60 Sekunden nach der Defibrillation mit einem biphasischen Defibrillator aufgenommen

Medi-Trace™ Cadence RTS

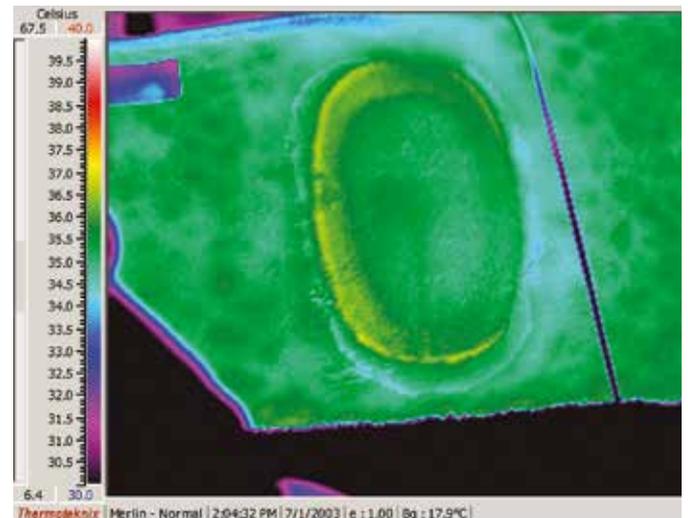

Medi-Trace™ Cadence RTS



Vollständiges Sortiment Medi-Trace™ Multifunktionselektroden

Medi-Trace™ Classic

Multifunktionselektroden



Medi-Trace™ Cadence RTS

Multifunktionselektroden
(strahlendurchlässig)

Die Nickel-Carbon-Anschlusskabel wurden für eine Röntgentransparenz unter Röntgenbedingungen entwickelt



Medi-Trace™ Cadence-PC

Multifunktionselektroden
(Pre-Connect)

Diese Elektroden ermöglichen ein direktes Anschließen an den Defibrillator vor Öffnen des Beutels



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
cardinalhealth.de

Nur für medizinisches Fachpersonal.

Wichtige Informationen: Lesen Sie vor der Anwendung die diesem Gerät beiliegende Gebrauchsanweisung Indikationen, Kontraindikationen, Nebenwirkungen, empfohlene Vorgehensweise, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Weitere Informationen zur Produktverfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Cardinal-Health-Vertreter. Informationen zur Verfügbarkeit. CARDINAL HEALTH, Cardinal Health LOGO, ESSENTIAL TO CARE und MEDI-TRACE sind Marken von Cardinal Health und können in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragen sein. oder in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2021 Cardinal Health. All Rights Reserved. Lit. No. 2PATR18-864353-2 (06/2021)

